

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Diese Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Diagnose einer Krankheit, Störung oder eines anormalen körperlichen Zustands verwendet werden.
4. Kinder unter 8 Jahren, Schwangere, Personen mit Osteoporose, Herzschrittmachern, künstlichen Gelenken, tragbaren EKG-Geräten oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um jeglichen Fluss von elektrischem Strom zu vermeiden.
5. Sämtliche Daten über die Körperzusammensetzung dienen lediglich als Referenzwerte und dürfen nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen zugelassenen Arzt betrachtet werden.
6. Belasten Sie die Waage nicht über die zulässige Höchstgrenze hinaus. (Maximale Kapazität: 180kg / 400lb)
7. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten bei der Messung sowie Verletzungen zu vermeiden.
8. Verwenden Sie zum Laden der Waage ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel und Ladegerät (DC 5V 0.5A, nicht im Lieferumfang enthalten).
9. Verwenden Sie die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, um Störungen oder sonstige Gefahren zu vermeiden.
11. Stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen Sie nicht auf das Gerät und treten Sie nicht darauf ein, um Verletzungen zu vermeiden.

12. Diese Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät.
Behandeln Sie es vorsichtig, um Schäden und Brüche zu vermeiden.
13. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel.
14. Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in extrem feuchten Räumen. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
15. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
2. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
3. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
5. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
6. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
8. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
9. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
10. ACHTUNG – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer

Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Kennzeichnung der Batteriehersteller

Hersteller: Dongguan Lean Power New Energy Technology Co.,Ltd.

Adresse: Room201, Building 3, No. 7, Jinchuan Road II, Xiegang Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China

Webseite: <http://www.leanpowercell.com>

E-Mail: ferris@leanpowercell.com

LIEFERUMFANG


MorphoScan x 1

USB-C-Ladekabel x 1 (Nur zum Aufladen, nicht für die Datenübertragung)


Benutzerhandbuch x 1

Kurzanleitung x 1

ÜBER IHRE MORPHOSCAN

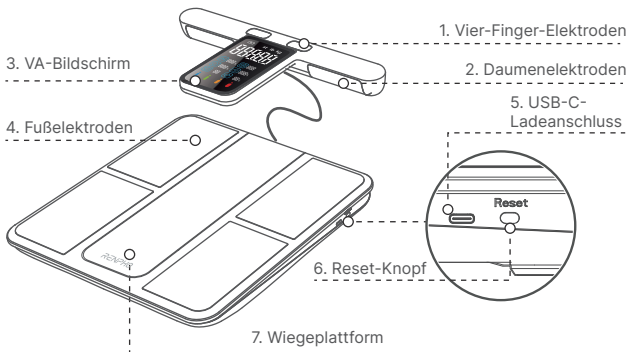

8. Griff

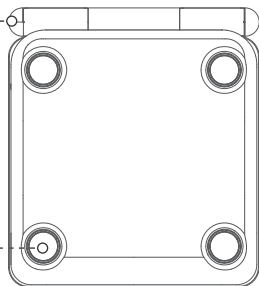

9. Fußpolster

Symbole


Symbol	Beschreibung
	Körperfettanteil
	BMI
	Körperwasseranteil
	Skelettmuskulaturanteil
	Metabolisches Alter
	Knochenmassenanteil
	Dünn
	Standard
	Übergewicht

	Starkes Übergewicht
	 Lädt auf  Vollständig aufgeladen
Err	Überladen Maximale Kapazität: 400 lb / 180 kg.
Lo	Niedriger Batteriestand Waage aufladen.
[	Falsches Messen Auf die Waage treten und erneut messen.
st lb kg	Einheiten Über die App umgeschaltet.


INITIALISIEREN/ZURÜCKSETZEN IHRER MORPHOSCAN

1. Drücken Sie vor der ersten Verwendung die Reset-Taste oder schließen Sie die Waage mit dem mitgelieferten Ladekabel und Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an, um die Waage zu initialisieren.
2. Um die Waage zurückzusetzen, drücken Sie die Reset-Taste.

Hinweis: Nach Zurücksetzen der Personenwaage, treten Sie zur Messung nur dann auf die Waage, wenn "000" oder "00" angezeigt wird.

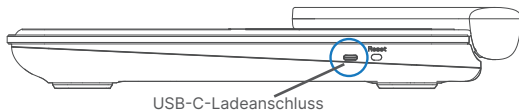

AUFLADEN IHRER MORPHOSCAN

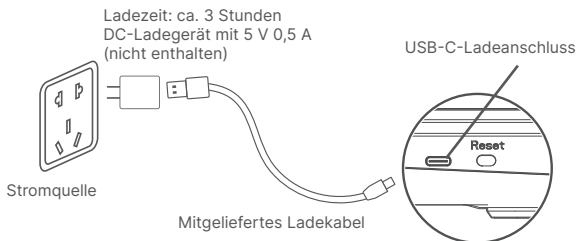

INSTALLATION DER APP UND KOPPLUNG

1. MorphoScan-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „MorphoScan“, um die App herunterzuladen.

Systemanforderungen: iOS 12.0 oder höher, Android 7.0 oder höher



Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Aktualisierungen und Verbesserungen kann die „MorphoScan“-App etwas anders aussehen.

2. Anmelden/Registrieren

- Wenn Sie noch kein Konto haben, tippen Sie auf „Anmelden“, registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und vervollständigen Sie Ihre Profilinformationen.
- Wenn Sie ein Konto haben, tippen Sie direkt mit einem bestehenden MorphoScan-App-Konto auf „Einloggen“.

3. Die Waage koppeln


Aktivieren Sie vor der Kopplung die WLAN-Funktion auf Ihrem Smartphone.

- Öffnen Sie die MorphoScan-App, stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche und stellen Sie sich mit nackten und trockenen Füßen darauf.
- Tippen Sie oben rechts auf der Seite „Messung“ auf „+“, tippen Sie dann auf „Mein Gerät“ und wählen Sie Ihre Körperanalysewaage aus der Geräteliste aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen.

VERWENDUNG IHRER MORPHOSCAN

* Erstellen Sie Ihr korrektes Benutzerprofil in der MorphoScan-App, bevor Sie Ihre erste Messung durchführen. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre Messungen genau aufgezeichnet und Ihrem Profil zugeordnet werden.



- Stellen Sie die Waage auf eine ebene, harte Oberfläche und stellen Sie sich mit nackten, trockenen Füßen auf die Elektroden der Waage. Stellen Sie sicher, dass zwischen Ihren Knien und den Oberschenkeln Platz ist.

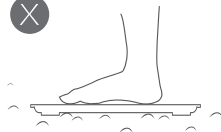

2. Fassen Sie den Griff mit den Daumen an den Daumenelektroden und mit den anderen Fingern an den Vierfingerelektroden.



3. Heben und halten Sie den Griff auf das richtige Niveau, wobei Ihre Arme auf natürliche Weise aufgehängt, leicht gebeugt und von Ihrem Körper und dem Bauch entfernt sind. Stellen Sie sich aufrecht hin, bleiben Sie ruhig und warten Sie, bis Ihre letzten Messungen auf dem Display der Waage angezeigt werden.

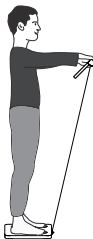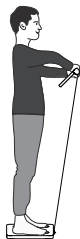

4. Ziehen Sie nach der Messung vorsichtig am Griff (achten Sie darauf, dass die Verlängerung nicht mehr als 30 cm beträgt) und legen Sie ihn vorsichtig wieder auf die Waage an seinen Platz. Die Waage überträgt die Daten an die App. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf zusätzliche Funktionen und Erkenntnisse zuzugreifen.

LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Meine Daten zu Gewicht, Körperfett und BMI kann ich vom Display der Waage abrufen, aber meine Familie oder Freunde können das nicht.

Ihre Familie oder Freunde müssen ihre Profilinformationen in Ihrer App vervollständigen, indem Sie auf der Seite „Mein“ auf „Person hinzufügen“ tippen oder sich mit ihrem eigenen Konto bei der MorphoScan-App anmelden.

2. Die Waage kann Körperfett und/oder andere Daten nicht erkennen.

- a. Achten Sie darauf, dass Sie barfuß und Ihre Füße trocken sind.
- b. Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie bis zum Ende des Wiegens still (circa 10 Sekunden).
Falls Sie noch immer kein Ergebnis haben, versuchen Sie, eine kleine Feuchtigkeitscreme auf Ihre Füße anzuwenden und erneut zu messen oder eine andere Person zu bitten, die 2 oben genannten Schritte auszuprobieren. Achten Sie bitte darauf, nicht auf die Wiegenplattform zu rutschen.

3. Die Waage funktioniert nicht oder ich erhalte ungenaue Messungen.

Drücken Sie die Reset-Taste, um die Waage zurückzusetzen.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Körperanalysewaage

Modell: R-MSC01

Wiegekapazität: 400lb / 180kg

Unterteilung: 0.2lb / 0.05kg

Größe: 310 x 346 x 52mm

Batteriekapazität: 500mAh
1.85wh

Eingang: 5V $\equiv$ 0.5A

Nennleistung: 2.5W

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.